


# Avance DPX-250 + BACS

## 2007-11-19 - Canvi del valor de FIELD

S'ha canviat el valor de **Field** per corregir la lleugera deriva que sembla tenir l'imant. Per fer-ho cal,

1. introduir una mostra en cloroform deuterat, CDCI3
2. prémer el botó **[FIELD]** i canviar el valor fins centrar el senyal de lock del CDCI3 en pantalla
3. a Topspin, executar la comanda **edlock**
4. a la finestra *Edlock* sortirà inicialment el valor de *Field* emmagatzemat.
  1. Prémer el botó amb una FID veure figura següent) per emmagatzemar el nou valor ajustat,
  2. comprovar que el nou valor de *Field* sigui el que sortia a la pantalla de la botonera de la BSMS,
  3. prémer el botó amb un disquet per guardar els canvis fets, i
  4. tancar la finestra *Edlock* per sortir.

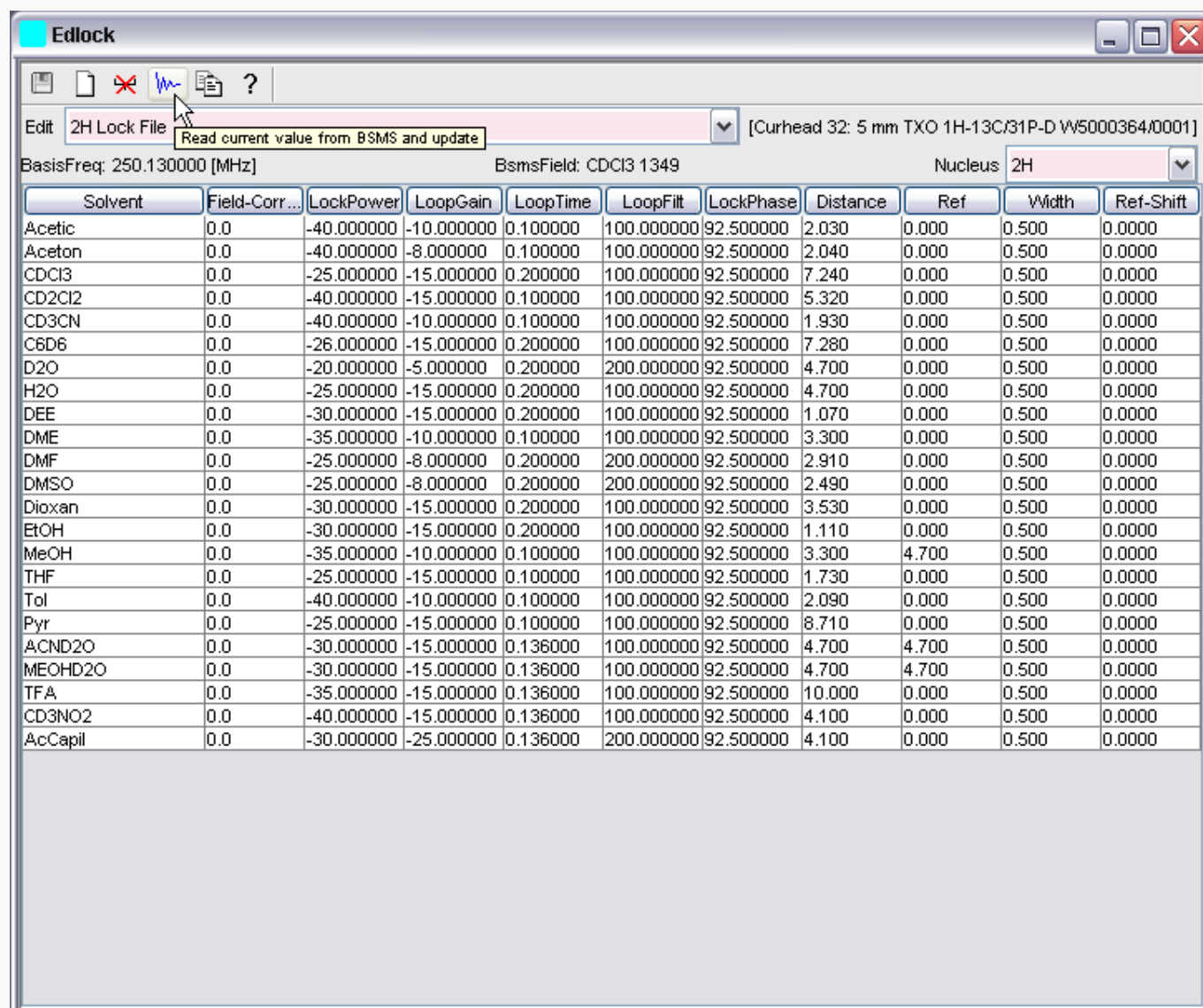

From:  
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:  
[https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=problemes\\_tecnic\\_sermn:20071119\\_reajust\\_field&rev=1195472814](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=problemes_tecnic_sermn:20071119_reajust_field&rev=1195472814)

Last update: **2007/11/19 12:46**

