


Cua de Rutina (Mòdul) - IconNMR

Diagrama de taules per el mòdul iconNMR

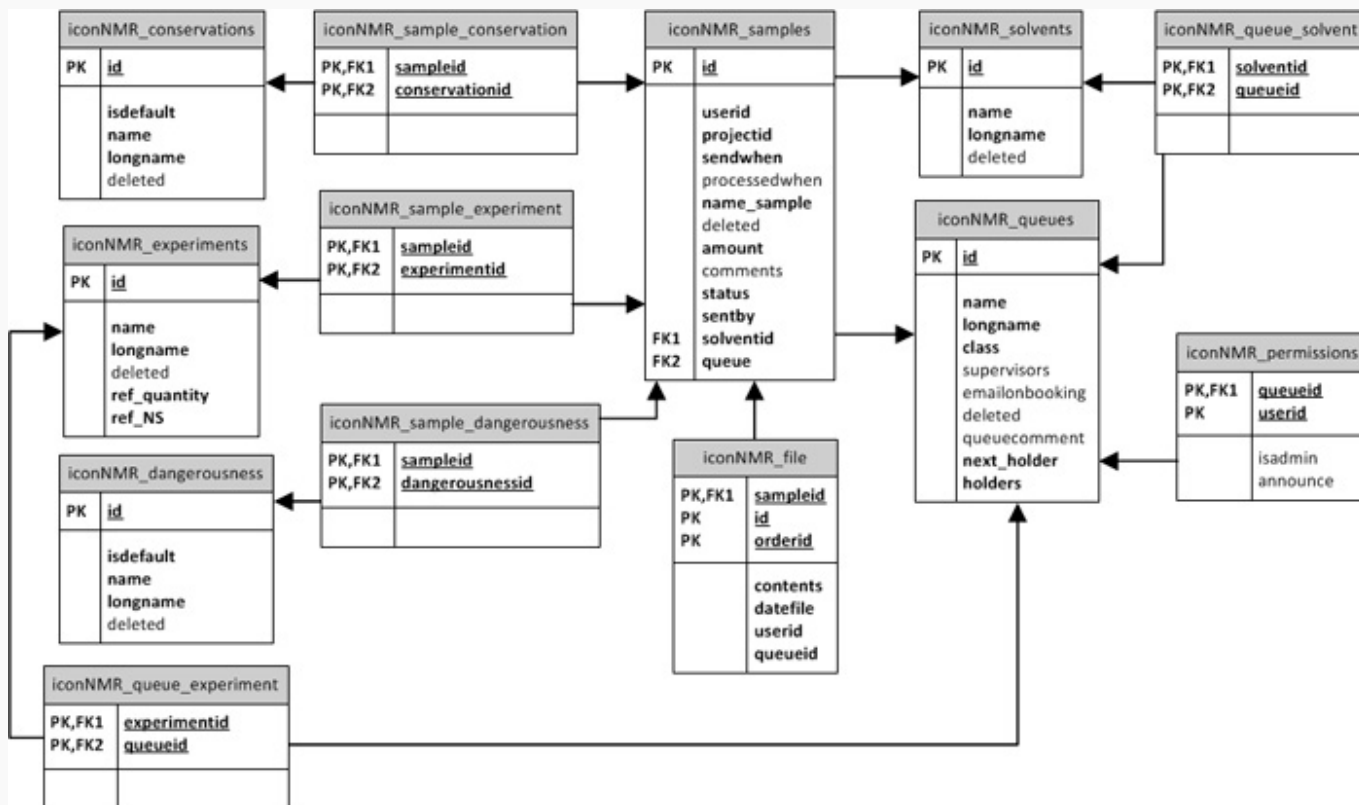

Nota: no surt al diagrama, però, els camps `userid` i `sentby` són claus externes de la taula ja existent 'users'. Igualment, el camp `projectid` és clau externa de la taula també existent 'projects'.

Reunió 30-05-12

Les frases taxades volen dir que ja ha estat implementat.

- Formulari d'enviar un Sample:
 - Sample name abans de Solvent
 - Spectrum Quality: High or Low (per defecte Low). Si és High, ns*2.
 - Sample prepared: Yes or Not (per defecte Not).
 - Process & Plot: Yes or Not (per defecte Not).
 - Conservation, només s'ha de poder marcar una opció.
- Usuari supervisor:
 - My group samples (Sent + Processed junt, es diferencia per la Processed Date)
 - My projects samples (Sent + Processed junt, es diferencia per la Processed Date)

Reunió 11-04-12

Les frases taxades volen dir que ja ha estat implementat.

- Formulari d'enviar un Sample i My Samples:
 - ~~A Processed Samples no ha de sortir el missatge de: "(Press CTRL to multiple choice)"~~
 - ~~La quantitat de mostra (Amount) és obligatòria i per defecte és el valor 40.~~
 - ~~Separar els camps del formulari amb l'ordre acordat.~~
 - ~~Al camp d'Experiment i als camps de Properties només es mostra el longname.~~
 - ~~Els camps de dins de 'Experiments and properties' han de ser obligatoris (per evitar queixes d'usuaris i demés).~~
 - ~~El camp Conservation i Dangerousness estan ordenats perquè primer surti el camp que té isdefault = 1.~~
 - ~~A mostres processades, les llistes experiments/perillositat/conservació només haurien de mostra els seleccionats.~~
 - ~~Implementar l'opció 'Sample as new' (tant a Sended com Processed Samples).~~
 - ~~Faltar implementar 'Delete samples' (només poden veure aquests Samples els administradors de la Cua).~~
 - ~~A My samples, fer un offset per poder passar pàgina (cada pàgina és una setmana)~~
- Altres:
 - ~~Al llistat de conservació/perillositat surt la columna default~~
 - ~~Masquerade per enviar samples en nom d'altres.~~
- Manage Samples:
 - ~~Ordenat de la més antiga a la més nova.~~
 - ~~Checkbox, select all, deselect all.~~
 - ~~Posa les mostres a processades.~~
 - ~~Processed Date (s'aprofita com a Deleted Date per mostres esborrades) es crea el processar una mostra i s'ordena per aquest camp.~~
 - ~~Offset cada 5 dies _linksForwardBack (com a My Samples) a Processed Samples i cada mes a Deleted Samples dins Manage Samples~~
 - ~~Si no s'ha seleccionat res, no crear un arxiu buit i avisar de l'error.~~
 - ~~Crear i descarregar el fitxer.~~
 - ~~Provar fitxers exemple al programa del iconNMR.~~
 - ~~Falta la fórmula correcte del càlcul del NS.~~
 - ~~Fer el ChangeLog file versió 1.3.1.~~
 - ~~Diagrama en Visio de taules de iconNMR.~~

Exemple nom fitxer: *bumblebee-file-311-20120521-171900.txt* on:

- 311 = id fitxer, id de la cua, id de l'usuari
- 20120521 = any-mes-dia
- 171900 = hora-minuts-segons

Notes d'en Miquel sobre l'IconNMR

Per ara deixo aquí la informació que he recopilat sobre la programació externa d'experiments a l'IconNMR (cua de rutina),

Per fer

- Decidir quins experiments s'ofereixen a la cua de rutina. Consultar els experiments a les carpetes C:\Bruker\TOPSPIN\exp\stan\nmr\par.*iconnmr* i C:\Bruker\TOPSPIN\exp\stan\nmr\par.*SeRMN* de l'espectròmetre Avance DPX-250 ROBOT ([iconnmr_parameter_sets.txt](#)).
- Decidir quins paràmetres d'adquisició deixem que pugui modificar l'usuari. Alternativament, es podria definir un catàleg més ampli d'experiments, per exemple, amb diferents *sw*, *ns*, *d1*, etcètera.
- Decidir quins solvents s'ofereixen a la cua de rutina ([iconnmr_solvents.txt](#)).
- Decidir com s'indica si la mostra ja ve preparada per l'usuari o si l'hem de preparar nosaltres. Cal guardar aquesta informació al programa de reserves?
- Decidir com s'indica si cal processar i representar els experiments. Cal guardar aquesta informació al programa de reserves?
- Redactar unes notes breus sobre com exportar els fitxers i importar-los a l'IconNMR.
- Què fem amb les opcions *SUBMIT* i *NO_SUBMIT*?
- Decidir el títol dels experiments, per exemple: *<data> <hora> - <sample name> \n <experiment> - <solvent> - <parameter set> [(modif)]* on *(modif)* només s'afegeix si s'ha modificat algun valor per defecte de l'experiment (parameter set) triat.

Fitxers per programació d'experiments

Aquest és un exemple senzill de fitxer per programar experiments a l'IconNMR. En aquest exemple, es programen dos experiments per una mostra d'un usuari,

```
# iconnmr external setup file
#
# dual experiment test file - default parameters modified
#
USER SeRMN
HOLDER 33
NAME ext-set-test-003
SOLVENT acetone
#
# begin of 1st experiment
#
EXPNO 1
NO_SUBMIT
PARAMETERS sw,20,o1p,0,ns,512
EXPERIMENT teo_proto
TITLE ext-set-test-004\n 1D-1H-experiment
#
# end of 1st experiment
#
# begin of 2nd experiment
#
EXPNO 2
NO_SUBMIT
PARAMETERS ns,32k
```

```
EXPERIMENT teo_carboni
TITLE ext-set-test-00\n 1D-13C-experiment
#
# end of 2nd experiment
#
# end of holder definition
END
```

Aquest altre exemple és més complet, i il·lustra com programar experiments per **múltiples mostres i usuaris**. Per exemple, pel primer usuari es programa un experiment per una mostra, i pel segon i tercer usuaris es programen dos experiments per cadascuna de les dues mostres enviades pels usuaris,

```
# iconnmr external setup file
#
# three users

# ##### BEGIN USER
USER SeRMN

# ##### BEGIN SAMPLE (HOLDER)
HOLDER 31
DELETE
NAME user1-sample1
SOLVENT cdcl3
# ##### BEGIN EXPERIMENT
PARAMETERS ns,128,swp,15,td,8192
EXPERIMENT teo_proto
TITLE user1-sample1-exp1
##### END SAMPLE (HOLDER)
END

##### BEGIN USER
USER avirgili

##### BEGIN SAMPLE (HOLDER)
HOLDER 32
DELETE
NAME user2-sample1
SOLVENT dmso
##### BEGIN EXPERIMENT
PARAMETERS ns,128,swp,15,td,8192
EXPERIMENT teo_proto
TITLE user2-sample1-exp1
##### BEGIN EXPERIMENT
EXPERIMENT teo_carboni
TITLE user2-sample1-exp2
##### END SAMPLE (HOLDER)
END
```


```
##### BEGIN SAMPLE (HOLDER)
HOLDER 33
DELETE
NAME user2-sample2
SOLVENT dmso
##### BEGIN EXPERIMENT
PARAMETERS ns,128,swp,15,td,8192
EXPERIMENT teo_proto
TITLE user2-sample2-exp1
##### BEGIN EXPERIMENT
EXPERIMENT teo_carboni
TITLE user2-sample2-exp2
##### END SAMPLE (HOLDER)
END
```

```
##### BEGIN USER
USER urquima
```

```
##### BEGIN SAMPLE (HOLDER)
HOLDER 34
DELETE
NAME user3-sample1
SOLVENT acetone
##### BEGIN EXPERIMENT
PARAMETERS ns,128,swp,15,td,8192
EXPERIMENT teo_proto
TITLE user3-sample1-exp1
##### BEGIN EXPERIMENT
EXPERIMENT teo_carboni
TITLE user3-sample1-exp2
##### END SAMPLE (HOLDER)
END
```

```
##### BEGIN SAMPLE (HOLDER)
HOLDER 35
DELETE
NAME user3-sample2
SOLVENT cdcl3
##### BEGIN EXPERIMENT
PARAMETERS ns,128,swp,15,td,8192
EXPERIMENT teo_proto
TITLE user3-sample2-exp1
##### BEGIN EXPERIMENT
EXPERIMENT teo_carboni
TITLE user3-sample2-exp2
##### END SAMPLE (HOLDER)
END
```

El resultat és pot veure a la següent captura de pantalla,

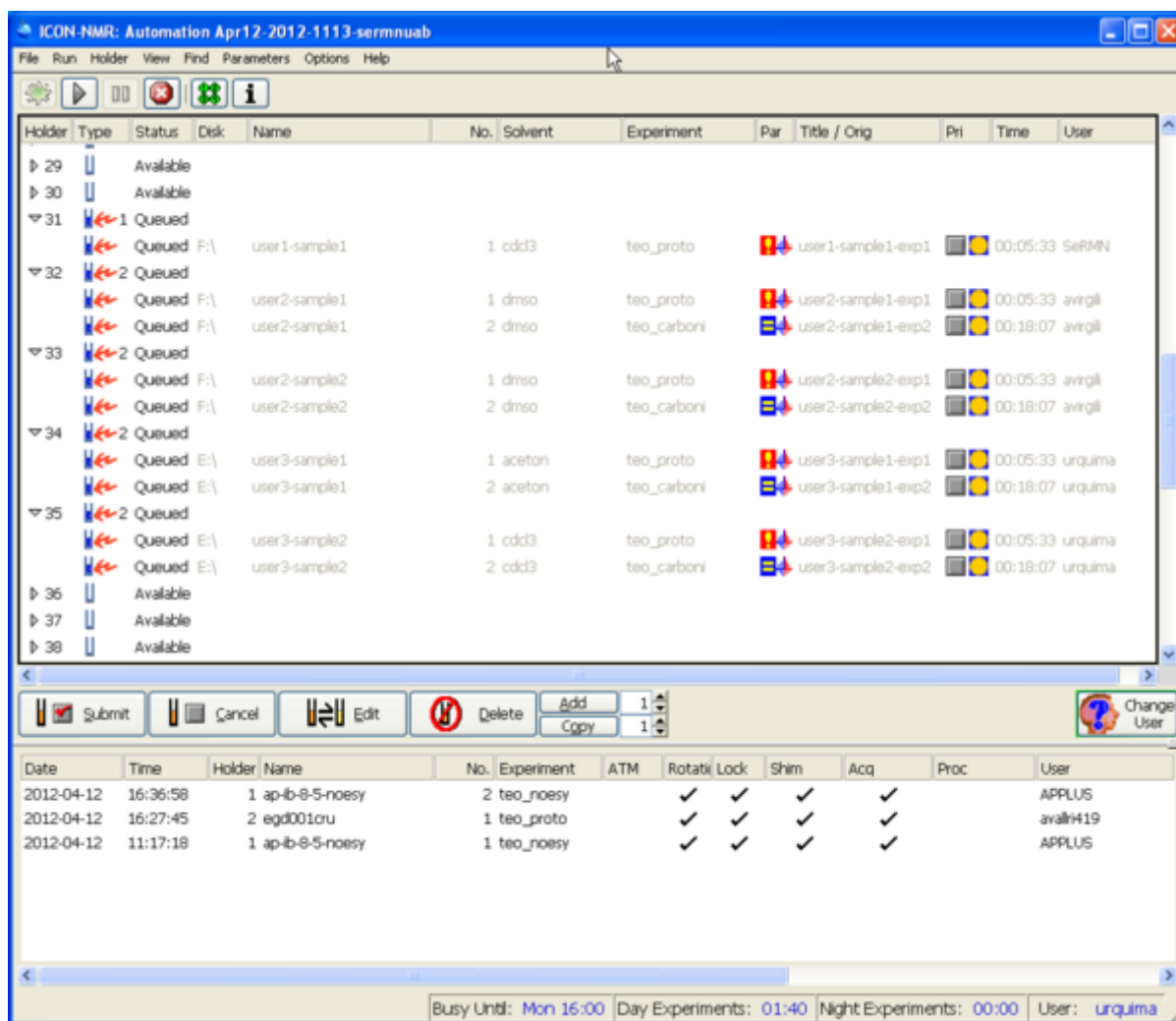

En aquest cas, els experiments no inclouen el paràmetre NO_SUBMIT i IconNMR els importa, programa i envia a la cua alhora. En aquests casos, és recomanable posar el programa IconNMR en mode *HALT* (prémer el botó ) per tal de poder comprovar que els experiments s'hagin importat correctament. Llavors, un cop verificats, només cal prémer el botó  perquè el programa comenci a processar els sol·licituds.

<note important>Així doncs, **els experiments a programar a l'IconNMR es poden exportar en un únic fitxer.**</note>

Altres fitxers d'exemple emprats a les proves. **COMPTE!** abans d'importar-los cal substituir les extensions .ext per .001, .002,... d'acord amb el número al final del nom del fitxer -001, -002,...)

- [iconnmr-external-setup-001.txt](#)
- [iconnmr-external-setup-002.txt](#)
- [iconnmr-external-setup-003.txt](#)
- [iconnmr-external-setup-004.txt](#)
- [iconnmr-external-setup-005.txt](#)
- [iconnmr-extset-mult_users-mult_samples-submit-1.txt](#)

Notes sobre l'ús de fitxers externs per programar experiments

Aquestes són les notes que vaig prendre mentre feia proves amb diferents fitxers. Caldrà tenir-les present a l'hora d'introduir la informació a la base de dades del Bumblebee, i quan es generin els fitxers.

- La importació dels fitxers és gairebé immediata. Tan bon punt es copien a la carpeta C:\Bruker\TOPSPIN\prog\tmp el programa els importa i mostra a la pantalla de l'IconNMR.
- Els fitxers importats es mouen a la carpeta C:\Bruker\TOPSPIN\prog\tmp\save, de forma que, en cas de necessitat, es podrien recuperar, editar (si calgués), i moure de nou a la carpeta C:\Bruker\TOPSPIN\prog\tmp.
- Després del paràmetre EXPERIMENT només pot anar TITLE, qualsevol altre paràmetre es descarta. Així doncs, cal respectar l'ordre de definició dels paràmetres que es mostra al fitxer d'exemple anterior.
- El nom de l'usuari ha de ser exactament un dels definits a l'IconNMR, i les majúscules i minúscules no són equivalents (case sensitive!)
- El nom del solvent ha de ser un dels noms reconeguts pel TopSpin/IconNMR
- Si el nom de la mostra es repeteix encara que sigui en un altre holder, els EXPNO s'incrementaran perquè no coincideixin amb els EXPNO de la mostra d'igual nom en un holder diferent.
- No sé quin és el límit per TITLE, però accepta sense problemes frases tan llargues com: *TITLE <data - hora> - ext-set-test-00\n 1D-13C - acetone - teo_carboni (modif)*.
- Si per error s'assigna el mateix HOLDER i EXPNO a una segona mostra, els experiments es programen al HOLDER indicat, però els EXPNO s'incrementen per no coincidir amb els ja definits. Malauradament, com que només es pot posar una mostra per holder, el que passarà és que a l'IconNMR haurem de moure aquests experiments al holder correcte.
- Si s'envien nous experiments a un holder amb experiments definits, els nous experiments s'afegeixen darrera dels existents, amb l'EXPNO incrementat per respectar els existents. Però si s'afegeix el paràmetre DELETE darrera del paràmetre HOLDER, els experiments existents s'esborraran abans d'afegir els nous, sense tenir en compte l'estat dels experiments (submitted, available, etc.).

Captures de pantalla de l'IconNMR

 **Fix Me!** Vaig fer varies captures de pantalla del programa IconNMR després d'importar diferents fitxers. Aquestes captures il·lustren els errors i problemes que es poden produir. Quan tingui una estona les comentaré.

KON400R: Automation Feb01-2012-1223-alfert

File Run Loader View F10 Parameters Options Help

Holder	Type	Status	Disk	Name	No.	Solvent	Experiment	Par	Title	Orig	Pri	Time	User
1	1	Finished	F:\	lpc	1	CDCl3	teo_proto					00:02:21	Synthesis
2	1	Finished	F:\	lpc723	2	CDCl3	teo_proto					00:02:21	Synthesis
3	1	Finished	F:\	lpc724	1	CDCl3	teo_proto					00:02:21	Synthesis
4	1	Finished	F:\	lpc725	1	CDCl3	teo_proto					00:02:21	Synthesis
5	1	Finished	F:\	lpc726	1	CDCl3	teo_proto					00:02:21	Synthesis
6	2	Finished	D:\	pv5ct	1	CDCl3	teo_proto					00:02:21	jreciana
7	2	Finished	D:\	pv5ct	2	CDCl3	teo_coy					00:50:16	jreciana
8	1	Finished	D:\	pv5t	1	CDCl3	teo_proto					00:02:21	jreciana
9	1	Finished	D:\	pv5t	2	CDCl3	teo_coy					00:50:16	jreciana
10	1	Finished	F:\	xe598	1	CDCl3	teo_proto					00:02:21	ICFO-xelias
11	1	Finished	F:\	xe599	1	CDCl3	teo_proto					00:02:21	ICFO-xelias
12	1	Finished	F:\	aprv595	1	CDCl3	teo_proto					00:04:30	APPLUS
13		Available											
14		Available											

Submit Cancel Edit Delete Add Copy

Date	Time	Holder	Name	No.	Experiment	ATM	Rotati	Lock	Shm	Acq	Proc	User	Disk	TR	Remarks
2012-02-16	10:48:20	10	aprv595	1	teo_proto							APPLUS	F:\		
2012-02-16	10:35:51	9	xe599	1	teo_proto							ICFO-xelias	F:\		
2012-02-16	10:24:33	8	xe598	1	teo_proto							ICFO-xelias	F:\		
2012-02-15	14:45:17	7	pv5t	2	teo_coy							jreciana	D:\		
2012-02-15	14:33:51	7	pv5t	1	teo_proto							jreciana	D:\		
2012-02-15	13:43:15	6	pv5ct	2	teo_coy							jreciana	D:\		
2012-02-15	13:32:18	6	pv5ct	1	teo_proto							jreciana	D:\		
2012-02-14	18:18:06	5	lpc726	1	teo_proto							Synthesis	F:\		
2012-02-14	18:07:10	4	lpc725	1	teo_proto							Synthesis	F:\		

Busy Until: No Jobs! Day Experiments: 00:00 Night Experiments: 00:00 User: albert

TD 16384

NS 32

SW 10.9592 [ppm]

O1P 4.892

D1 1

OK

Task ID	Status	Path	Test Name	Count	Substrate	Protocol	Test Name	Time	Operator
29	Available								
30	Available								
31	1 Queued								
	Queued	D:\	ext-set-test-001	1	cdd3	teo_proto	ext-set-test-1D-1H-exp	00:02:21	sermn
32	1 Queued								
	Queued	D:\	ext-set-test-002	1	cdd3	teo_proto	ext-set-test-1D-13C-ex		sermn
33	3 Queued								
	Queued	D:\	ext-set-test-003	1	acetone	teo_proto	ext-set-test-1D-1H-exp	00:02:21	sermn
	Available	D:\	ext-set-test-003	2	acetone	teo_carboni	ext-set-test-1D-13C-ex		sermn
	Queued	D:\	ext-set-test-003	3	acetone	teo_proto	ext-set-test-1D-1H-exp	00:02:21	sermn
	Available	D:\	ext-set-test-003	4	acetone	teo_carboni	ext-set-test-1D-1H-exp	02:01:01	sermn
34	Available								
35	Available								
36	Available								

Index	Status	Path	Size	File Type	Protocol	Thumbnail	File Name	Duration	Source
30	Available								
31	Available								
	Available	D:\ext-set-test-001	1 cdd3	teo_proto		ext-set-tes			SeRMN
32	Available								
	Available	D:\ext-set-test-002	1 cdd3	teo_proto		ext-set-tes 1H-experin		00:05:33	SeRMN
33	Available								
	Available	D:\ext-set-test-003	1 aceton	teo_proto		ext-set-tes 1D-1H-exp			SeRMN
	Available	D:\ext-set-test-003	2 aceton	teo_carboni		ext-set-tes 1D-13C-ex			SeRMN
	Available	D:\ext-set-test-003	3 aceton	teo_proto		ext-set-tes 1D-1H-exp		00:22:59	SeRMN
	Available	D:\ext-set-test-003	4 aceton	teo_carboni		ext-set-tes 1D-13C-ex		00:01:16	SeRMN
34	Available								
35	Available								



Name	Value	Unit	Comment
TD	8192		
NS	128		
SW	10.9592	[ppm]	
O1P	4.892		
D1	1		

Last update: 2012/06/01 12:30 sermn_wiki:userpages:marta:cua_rutina https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=sermn_wiki:userpages:marta:cua_rutina&rev=1338546631

Group	Item	Path	File	Protocol	Icon	Label	Time	Method
31	Available							
	Available	D:\ext-set-test-001	1 cdd3	teo_proto		ext-set-test-1D-1H - cc		SeRMN
32	Available							
	Available	D:\ext-set-test-002	1 cdd3	teo_proto		ext-set-test-1D 1H - cc		00:05:33 SeRMN
33	Available							
	Available	D:\ext-set-test-003	1 aceton	teo_proto		ext-set-test-1D 1H - ac		SeRMN
	Available	D:\ext-set-test-003	2 aceton	teo_carboni		ext-set-test-1D 13C - a		SeRMN
	Available	D:\ext-set-test-003	3 aceton	teo_proto		ext-set-test-1D 1H - ac		SeRMN
34	Available							
	Available	D:\ext-set-test-004	1 aceton	teo_proto		<data - hor 1D 1H - ac		00:22:59 SeRMN
	Available	D:\ext-set-test-004	2 aceton	teo_carboni		<data - hor 1D-13C - a		00:01:16 SeRMN
	Available							
35	Available							
36	Available							

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=sermn_wiki:userpages:marta:cu_a_rutina&rev=1338546631

Last update: **2012/06/01 12:30**

